



MANUEL D'UTILISATION – Masque LED GlowTech

Masque LED en silicone – Soins de
luminothérapie pour le visage

Veillez lire attentivement cette notice avant toute utilisation
et conserver ce guide pour toute référence future.



www.revivella-paris.com

SOMMAIRE

Informations Générales	3
Principe du Produit	7
Contre-Indications	9
Vérifications Avant Utilisation	11
Mode d'Emploi	12
Précautions d'Utilisation	14
Utilisation de la Télécommande	15
Chargement de la batterie	17
Entretien et Stockage	18

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES


- Produit : Masque LED GlowTech Revivella Paris – Soins de lumineothérapie pour le visage
- Fabricant : Shenzhen Idea Light Limited, 3rd floor, Block B, Shengdelan Industry Park, Guanian, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province, China, 518110
- Importateur : REVIVELLA PARIS, 71 Avenue de Verdun, 92320 Châtillon, France
- Pays d'origine : Fabriqué en Chine / Made in China
- Certifications : CE, FCC, RoHS, FDA 510K
- Conforme aux réglementations européennes

Paramètres

Nom du produit	GlowTech LED Mask – REVIVELLA Paris
Nombre Total de LED	114 X 3 (Triple LED)
Dimensions	320x210mm (Masque Visage)
Longueurs d'Onde des LED	415nm 630nm 830nm
Réglage de la Luminosité	0%-100%
Couleur du Masque	Blanc
Poids Net	395 ± 5g
Modes	4 Modes (Rouge, Bleu, Infrarouge, Rouge + Bleu)
Alimentation	Max. 12W
Matériaux	Silicone de grade médical
Minuteur	1-30mn
Fréquence	0-10000Hz
Application	Visage
Capacité de la Batterie	4000 mAh
Garantie	2 ans
Certifications	CE, FCC, RoHS, FDA, 510K

Contenu de la boîte

- ✓ Masque LED pour le visage
- ✓ Télécommande
- ✓ Sangles Velcro (2 paires)
- ✓ Câble de charge micro-USB
- ✓ Manuel d'utilisation
- ✓ Protège-yeux en silicone (2 paires)

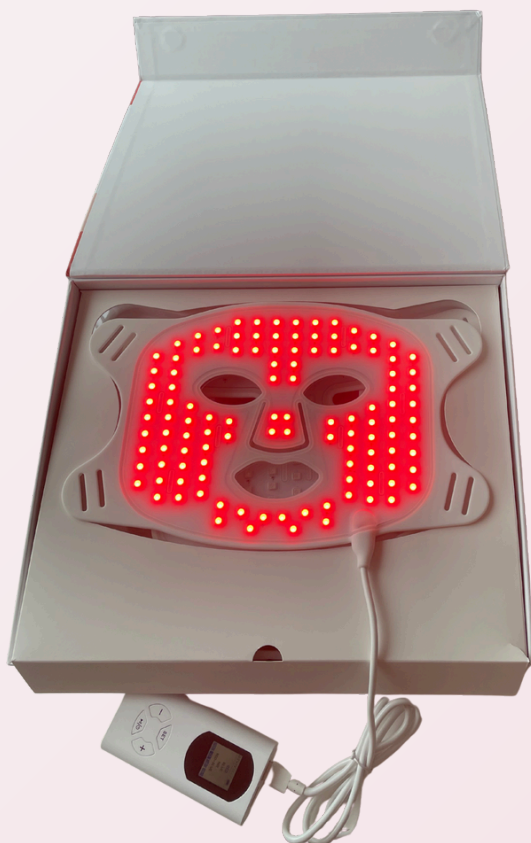

CONTENU DE LA BOÎTE



1X Câble de charge USB



2X Sangles élastiques



2X Protège-yeux en silicone



1X Masque Visage



2. PRINCIPE DU PRODUIT

Le masque LED GlowTech en silicone repose sur la bio-stimulation par lumineothérapie, qui utilise des longueurs d'onde spécifiques pour stimuler les cellules cutanées. Il emploie une technologie nanométrique pour guider la lumière de manière homogène, sans générer de chaleur excessive.



Bienfaits du traitement :

- ✓ Stimulation de la production de collagène et d'élastine (jusqu'à x5)
- ✓ Réduction des rides et amélioration de la fermeté et de l'élasticité de la peau
- ✓ Régulation de la production de mélanine (réduction des tâches pigmentaires)
- ✓ Diminution des imperfections et régulation du sébum
- ✓ Activation de la circulation sanguine et oxygénation de la peau
- ✓ Apaisement des rougeurs et inflammations cutanées

3. CONTRE-INDICATIONS

L'utilisation de ce masque LED est strictement déconseillée dans les cas suivants :

X Âge : Ne pas utiliser si vous avez moins de 22 ans.

X Type de peau : Déconseillé aux personnes ayant un type de peau Fitzpatrick V ou VI.

X Photosensibilité : Ne pas utiliser en cas de photosensibilité ou si vous prenez des médicaments photosensibilisants (ex. : antibiotiques, isotrétinoïne, certains anti-inflammatoires).

X Épilepsie : Déconseillé aux personnes ayant des antécédents médicaux de crises d'épilepsie déclenchées par la lumière.

X Acné sévère : Ne pas utiliser en cas d'acné sévère (présence de nodules inflammatoires, lésions profondes).

X Grossesse et allaitement : Déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes.

X Interventions esthétiques récentes : Ne pas utiliser dans le mois suivant une injection d'acide hyaluronique, Botox, peeling chimique, laser dermatologique ou autre intervention invasive.

X Peau lésée : Ne pas utiliser sur des plaies ouvertes, brûlures, rougeurs sévères ou saignements.

X Exposition au soleil récente : Ne pas utiliser si vous avez eu un coup de soleil au cours des deux dernières semaines.

Si vous avez un doute sur votre état de santé, consultez un professionnel de santé avant utilisation.

4. VÉRIFICATIONS UTILISATION

AVANT

✓ Vérifiez votre type de peau

- L'appareil est uniquement destiné aux types de peau Fitzpatrick I à IV.

- Les types V et VI ne doivent pas utiliser cet appareil.

✓ Vérifiez votre niveau d'acné avant utilisation

Niveau d'acné	Caractéristiques cliniques	Utilisation de l'appareil
Légère	Quelques rougeurs et boutons localisés	✓ Autorisé
Modérée	Plusieurs boutons et rougeurs sur des zones larges	✓ Autorisé sous surveillance
Sévère	Rougeurs généralisées, nombreux boutons, pustules, nodules sous la peau	X Interdit

⚠ Cet appareil n'est pas adapté aux personnes souffrant d'acné sévère.

5. MODE D'EMPLOI

⚠ Avant la première utilisation :

- ✓ Chargez complètement l'appareil (il ne fonctionne pas lorsqu'il est en charge).
- ✓ Effectuez un test de sensibilité à la lumière sur une petite zone de peau avant une application complète.

Recommandations d'utilisation :

1. Nettoyez votre visage et séchez soigneusement votre peau.
2. Branchez le masque à la télécommande via le câble USB.
3. Allumez le masque en appuyant 3 secondes sur le bouton On/Off.
4. Sélectionnez votre mode lumineux avec les boutons "Set" et "+".
5. Réglez la durée du traitement (15 à 30 minutes recommandées).

6. Ajustez l'intensité lumineuse selon votre confort.

7. Allongez-vous dans un endroit calme, en évitant de fixer directement les lumières.

8. Après utilisation, nettoyez le masque avec un chiffon doux légèrement humide.

Fréquence d'utilisation :

✓ Anti-âge & rides → 5 fois par semaine pendant 6 semaines, puis 1 à 2 fois par semaine en entretien.

✓ Acné & imperfections → 4 fois par semaine pendant 6 semaines, puis ajuster selon l'évolution de la peau.

6. PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

⚠ Ne pas regarder directement la lumière LED (utilisez les protections oculaires fournies).

⚠ Ne pas immerger le masque.

⚠ Ne pas utiliser pendant le sommeil.

⚠ Tenir hors de portée des enfants (risque de strangulation avec le câble USB).

⚠ Ne pas modifier ou démonter l'appareil (annulation de la garantie, risque d'endommagement).

⚠ Ne pas exposer votre peau au soleil immédiatement après le traitement (appliquer une protection solaire si nécessaire).

7. UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

1. Écran d'affichage → Indique le niveau de batterie, la durée du traitement, le mode et l'intensité lumineuse.


2. Bouton On/Off → Appui long (3 secondes) pour allumer ou éteindre.

3. Bouton "SET" → Permet d'accéder aux réglages et options avancées.

4. Boutons "+" et "-" → Ajustent le temps (1 à 30 min), l'intensité lumineuse (0-100 %), et la fréquence des impulsions (0-10 000 Hz). Permettent de basculer entre les différents modes : Bleu, Rouge, NIR, Bleu + Rouge
Le Mode "NULL" → Désactive la lumière pulsée (lumière continue).




MODES DE SOINS

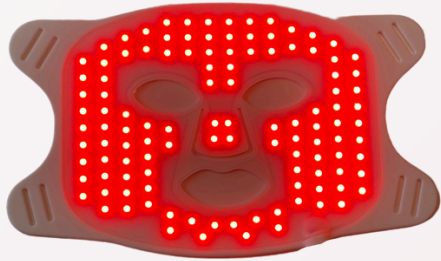

● Rouge (630 nm)

Les bienfaits anti-âge incluent la stimulation de la production de collagène et d'élastine. Améliore la circulation sanguine. Réduit l'apparence des ridules et des rides. Diminue les symptômes de l'eczéma, du psoriasis et de la rosacée, notamment les rougeurs, les démangeaisons, la desquamation et les gonflements.

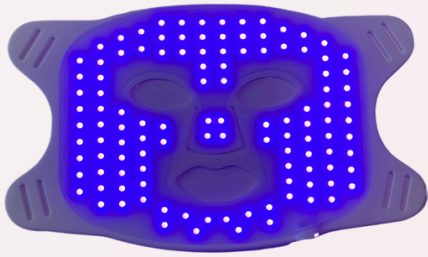

● Bleu (415 nm)

Possède des bienfaits antibactériens et réduit l'inflammation. Traite l'acné légère à modérée en éliminant les bactéries responsables. Régule l'activité excessive des glandes sébacées et réduit l'apparence des cicatrices d'acné. Diminue la pigmentation et les dommages causés par le soleil. Réduit la desquamation due au psoriasis.



● Proche Infrarouge (830 nm)

Cible les cellules fibroblastes en profondeur, stimulant la production de collagène et d'élastine, pour une peau plus repulpée, ferme et d'apparence plus jeune.



● Rose (630 nm + 415 nm)

Offre les bienfaits combinés de la lumière rouge et bleue.



● **Rouge (630 nm)** → Stimule la production de collagène et d'élastine, réduit les rides et ridules, améliore la fermeté et l'élasticité de la peau.



● **Bleu (415 nm)** → Purifie la peau, élimine les bactéries responsables de l'acné, régule le sébum et apaise les inflammations.



● **Rose (630 nm + 415 nm)** → Action combinée anti-âge & anti-imperfections, unifie le teint, réduit les taches pigmentaires et illumine la peau.



● **Infrarouge (830 nm)** → Régénère en profondeur, accélère la cicatrisation, réduit les rougeurs et inflammations, améliore la densité cutanée.

8. CHARGEMENT DE LA BATTERIE

Ne pas utiliser le masque lorsqu'il est en charge. Toujours s'assurer que l'appareil est hors tension avant de le charger.

Caractéristiques de la batterie :

- Capacité : 4000 mAh
- Temps de charge : 3 heures
- Autonomie : 3,5 heures
- Indicateur de batterie sur l'écran
- Recharge recommandée dès que la batterie descend sous 20 %
- Extinction automatique si la batterie est vide

9. ENTRETIEN ET STOCKAGE

- ✓ Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux légèrement humidifié après chaque utilisation.
- ✓ Stockez dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et des températures extrêmes.
- ✓ Ne pas plier excessivement le masque en silicone pour éviter d'endommager les circuits LED internes.
- ✓ En fin de vie, recyclez l'appareil conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques (DEEE).

BESOIN D'AIDE ?

 Service client : contact@revivella-paris.com

 Site web : revivella-paris.com

Conforme aux réglementations européennes –
Mars 2025


REVIVELLA
PARIS

